


迷你气体自动混合器

建造属于自己的优质气体站!

- 自由选择气体
- 每种气体独立流率
- 无应力的流量测量
- 由工业发酵软件SIAM独立实现程序可控或远程控制

哪些气体是细胞所需的?

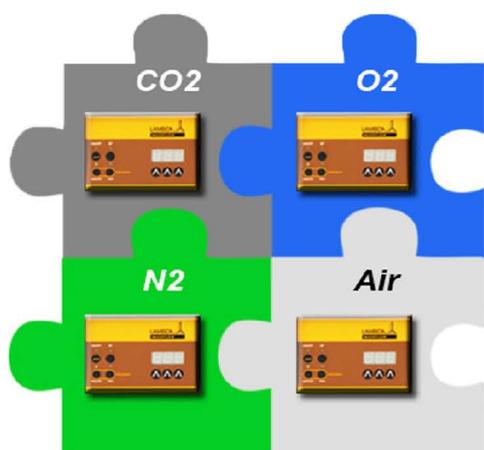

pO₂控制和O₂浓缩
由CO₂控制pH
恒定气流

迷你四气体混合器组合起来就像拼拼图一样简单

它是一款优质, 省钱, 高效的设计

每个质量流量独立控制气体混合器里的一种气体

迷你四气体混合器标准化

根据你的项目, 你可以挑选:

- 最多4种气体选择

- 2种不同的选择范围, 低至500毫升/分钟或高至5000毫升/分钟

为什么质量流量?

- 专门为精确流量测量和气流控制所设计
- 使用优质低压降的薄片状质量流量感应器
- 流速调节通过一个特别相称的针阀的微处理器控制
- 流速实现程序可控 (高达50对的流量及流次)
- 转移的气体体积通过积分仪得以计算其总量

